

MOLECULAR. IN MINUTES.™

ID NOW™ COVID-19 2.0

PRUEBAS FLEXIBLES:

Un único hisopo del paciente para COVID-19
o para COVID-19 y gripe A y B

VALIOSO | RÁPIDO | PRECISO | INTELIGENTE | SENCILLO



OPCIONES **VALIOSAS**


UN HISOPO. DOS PRUEBAS.

La COVID-19 y la gripe comparten síntomas frecuentes como fiebre, tos y dificultad para respirar, entre otros, lo que dificulta la diferenciación basándose únicamente en los síntomas.

La plataforma ID NOW™ le ofrece la flexibilidad de realizar la prueba de COVID-19 solamente o la prueba de COVID-19 y de gripe A y B utilizando la muestra de un único hisopo del paciente.

Este flujo de trabajo flexible y optimizado ofrece resultados rápidos y fiables para que pueda tratar a los pacientes rápidamente, ayudando a controlar la propagación de la enfermedad. Además, esta solución rentable ayuda a eliminar pruebas innecesarias en situaciones de baja prevalencia.

MUESTRA DE UN SOLO HISOPO

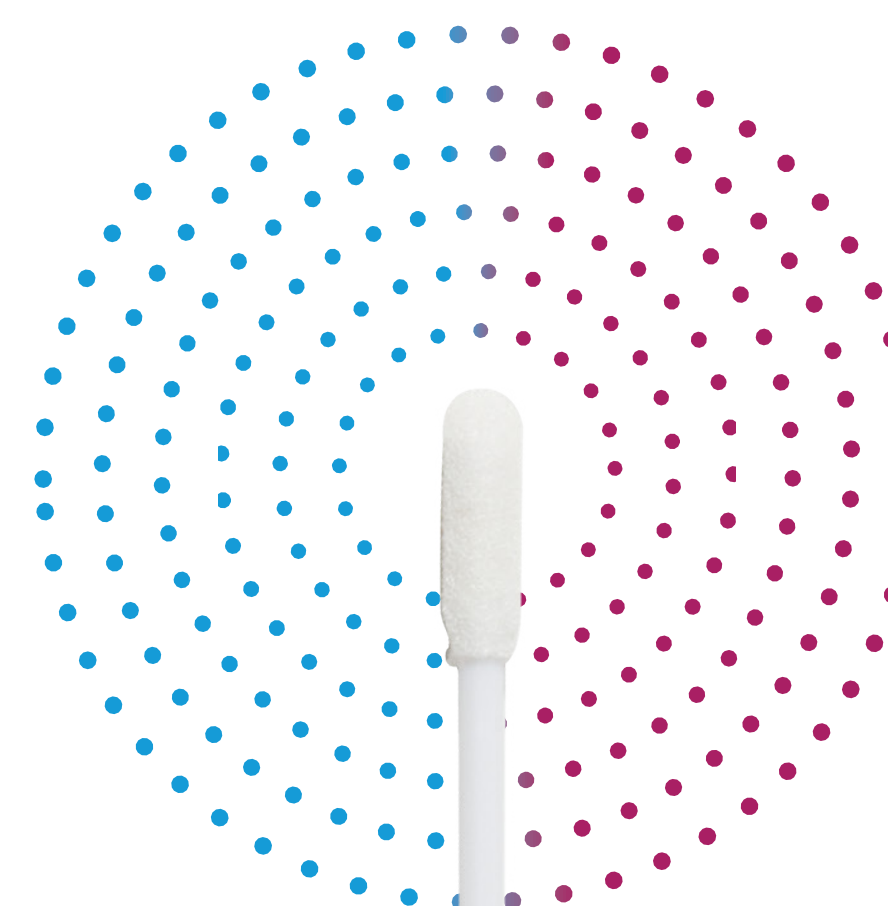

● COVID-19

● Gripe A y B

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO RÁPIDOS

ACTÚE SIN DEMORA.

ID NOW™ COVID-19 2.0 proporciona resultados precisos en tan solo unos minutos, dándole acceso en tiempo real a la información que necesita para tomar decisiones prácticas durante la primera visita del paciente.

La plataforma ID NOW™ proporciona el diagnóstico donde y cuando se necesita: en entornos al lado del paciente en el punto de atención.



POSITIVO PARA
COVID-19

Resultados en solo
6 minutos



NEGATIVO PARA
COVID-19

Resultados en
12 minutos o menos



RESULTADOS DE COVID-19 +
GRIPE A Y B EN

15-22 MINUTOS

tiempo total de la prueba*

* Tiempo total de la prueba cuando se realiza secuencialmente con un único hisopo del paciente (resultados de la prueba de COVID-19 2.0 en 12 minutos o menos y de la prueba Influenza A & B 2 en 10 minutos o menos cuando se realizan siguiendo un flujo de trabajo secuencial). Los resultados positivos secuenciales de la prueba de gripe después de un resultado negativo de la prueba de COVID-19 se muestran en tan solo 15 minutos de tiempo total de la prueba.

PRECISIÓN SIN CONCESIONES

TRATE CON CONFIANZA
EN EL PUNTO DE ATENCIÓN
AL PACIENTE.

Con la plataforma ID NOW™, puede disponer de resultados moleculares en tiempo real durante la primera visita del paciente.

ID NOW™ es una prueba de amplificación de ácidos nucleicos (NAAT) que utiliza la tecnología de reacción de amplificación por mellado (NEAR). Esta tecnología molecular isotérmica utiliza enzimas propias y una temperatura constante para conseguir la amplificación más rápida posible del ácido desoxirribonucleico (ADN), ofreciendo resultados en una fracción del tiempo que tardan las pruebas moleculares de laboratorio tradicionales.

SENSIBILIDAD

99,0 % de PAP (191/193)

En un plazo de 7 días desde el inicio de los síntomas y valor de Ct <30

SENSIBILIDAD

93,3 % de PAP (237/254)

En un plazo de 7 días desde el inicio de los síntomas


ESPECIFICIDAD

98,5 % de PAN (605/614)

El umbral de ciclo (Ct) se puede emplear como una aproximación del nivel inicial de virus en una muestra. Unos valores de Ct bajos se asocian a niveles altos de virus inicial, y unos valores de Ct altos se asocian a niveles bajos de virus. Las concentraciones de virus más bajas (valor de Ct alto) suelen estar asociadas a una infección en fase tardía, cuando la persona ya no es infecciosa.¹

PAN = porcentaje de acuerdo negativo

PAP = porcentaje de acuerdo positivo

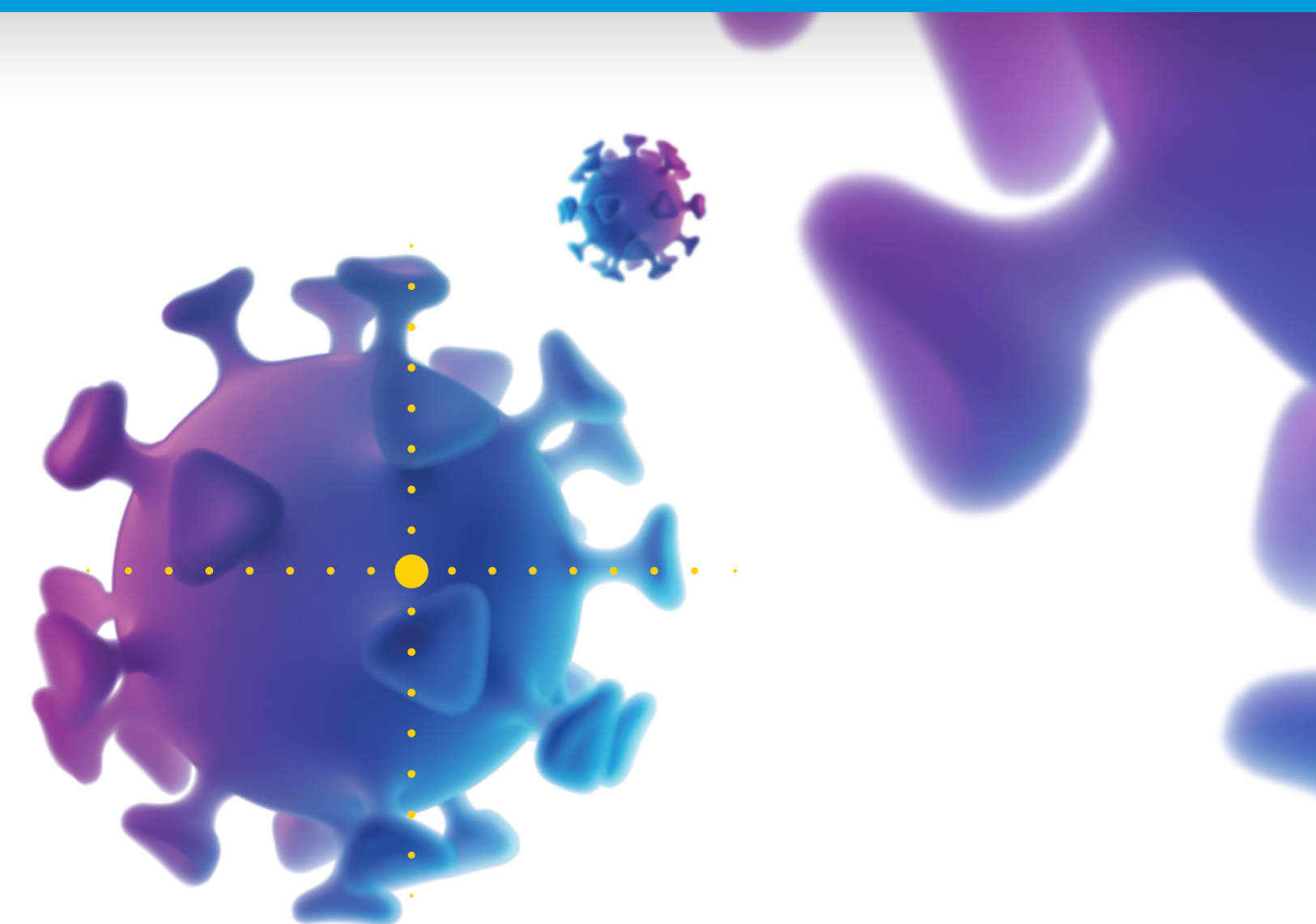

LAS DIRECTRICES DE LA SOCIEDAD EUROPEA DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS (ESCMID, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) recomiendan la realización de pruebas moleculares rápidas (pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, o NAAT) para la COVID-19 siempre que la rapidez de los resultados, el resultado del paciente y el aislamiento temprano sean importantes.²

TECNOLOGÍA **SENCILLA E INTELIGENTE**

**DISEÑADA DE FORMA
INTUITIVA. CONECTADA
DE FORMA FIABLE.**

La plataforma ID NOW™ está diseñada con operaciones intuitivas que le guían en cada paso. Además, los kits de ensayo no requieren refrigeración y contienen todos los componentes necesarios para que pueda realizar pruebas a demanda, nada más sacarlos de la caja.

El ensayo ID NOW™ COVID-19 2.0 requiere la versión de software 7.0.0.20 de ID NOW™. Póngase en contacto con su representante de Abbott para obtener más información sobre esta importante actualización de software.



ID NOW™


**HISTORIA
CLÍNICA DEL
PACIENTE**

HOSPITAL

La plataforma ID NOW™ se integra fácilmente en los flujos de trabajo de diagnóstico de pacientes existentes y se conecta fácilmente con los sistemas informáticos de hospitales, laboratorios o pacientes.

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

NOMBRE DEL PRODUCTO

CÓDIGO DE PRODUCTO

ID NOW™ COVID-19 2.0 KIT DE PRUEBA CON 24 ENSAYOS	193-000
ID NOW™ COVID-19 2.0 KIT DE CONTROL (12 hisopos positivos, 12 en blanco)	192-080
TUBO DE TRANSPORTE DE HISOPOS DE COVID-19 PAQUETE ACCESORIO 24 UNIDADES	190-010
ID NOW™ INFLUENZA A & B 2 KIT DE PRUEBA CON 24 ENSAYOS	427-000
ID NOW™ INFLUENZA A & B 2 KIT DE HISOPOS DE CONTROL (12 hisopos positivos, 12 en blanco)	425-080

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON SU REPRESENTANTE LOCAL DE ABBOTT O HAGA CLIC EN EL ENLACE SIGUIENTE.

HAGA CLIC AQUÍ O VISITE globalpointofcare.abbott



1. Cevik M, Tate M, Lloyd O, Maraolo AE, Schafers J, Ho A. SARS-CoV-2, SARS-CoV, and MERS-CoV viral load dynamics, duration of viral shedding, and infectiousness: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Microbe*. 2021;2(1):e13-e22.

2. Fragkou PC, De Angelis G, Menchinelli G, et al. ESCMID COVID-19 guidelines: diagnostic testing for SARS-CoV-2. *Clin Microbiol Infect*. 2022;28(6):812-822. doi:10.1016/j.cmi.2022.02.011

© 2022 Abbott. Reservados todos los derechos. Todas las marcas comerciales mencionadas pertenecen al grupo de empresas Abbott o a sus respectivos propietarios. Las fotografías aquí mostradas se utilizan solo para fines ilustrativos. Las personas que aparecen en esas fotografías son modelos. COL-12715-03 10/22